

Q150洛氏多用途硬度计

符合标准: Rockwell DIN EN ISO 6508, ASTM E-18

HRA , HRB , HRC , HRD , HRE , HRF , HRG , HRH , HRK , HRL , HRM
, HRP , HRR , HRS , HRV

HR 15-N/T/W/X/Y , HR 30-N/T/W/X/Y , HR 45-N/T/W/X/Y。

符合标准: Brinell DIN EN ISO 6506, ASTM E-10

1/1 , 1/2.5 , 1/5 , 1/10 , 1/30 , 2.5/6.25 , 2.5/15.6 , 2.5/31.25 , 2.5/62.5
, 2.5/187.5

5/25 , 5/62.5 , 5/125 , 5/250 , 10/100 , 10/250。

符合标准: Vickers DIN EN ISO 6507, ASTM E-384, ASTM E-92

HV1 , HV2 , HV3 , HV5 , HV10 , HV20 , HV30 , HV50 , HV100。

Q150洛氏多用途硬度计


全洛氏标尺,可配置光学测量系统进行布氏及维氏试验;
并且可以改造成全自动的工作模式。

- ◆ 试验过程全自动,并可选配自动开始测试功能;
- ◆ 试样夹持或松开;
- ◆ 可创建试验方法、数据统计、数据曲线,
并且可以按照ISO、ASTM标准进行硬度值的转换;
- ◆ 数据输出接口:USB;
- ◆ 采用内置PC,软件可升级到Qplx T12版本。



主要特点

- ◆ **M**：手动摇杆控制测试头上下移动
- ◆ **MS**：手动摇杆控制测试头上下移动，较小测试空间
- ◆ **CS/C**：固定C型机架，载物台通过手轮上下驱动
- ◆ **E**：电机驱动测试头上下移动

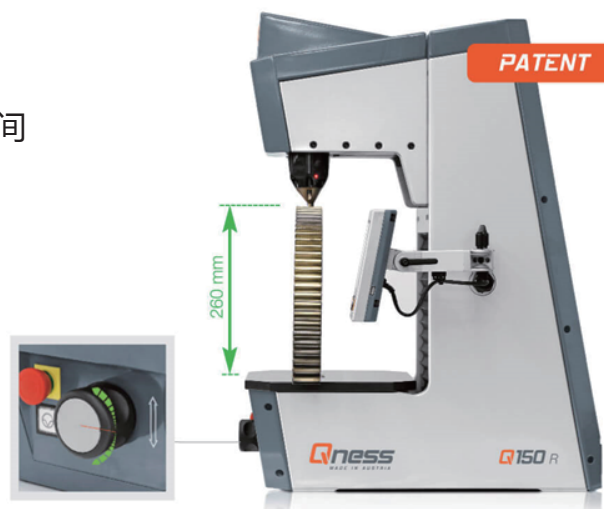

主要特点



◆ 灵活的高度调节：

电器控制系统被集成应用于硬度计中，使得试验头装置的上下移动非常灵敏及精确。根据旋钮转动的角度可以轻松地控制试验头的速度。测试头装置具有防撞击自动减速功能。

◆ 改装成为通用硬度计：

移动砧板到达镜头下方进行光学测量采用磁性砧板，保证样品在移动过程中不发生位移镜头装置具有高的分辨率和长焦距，并且具有自动亮度调节功能。采用Qplx T12软件，在12英寸的触摸屏上进行操作。

尺寸图

